

**Inovatīvi higiēniski tualetes maisiņi, gatavi lietošanai, praktiski, droši, ērti, neitralizē nepatīkamus aromātus**



Praktiski un ērti lietojami, nodrošina diskretumu un komfortu




Novērš nepatīkamus aromātus, var utilizēt kā parastos atkritumus



Higiēniski un droši, pasargā no infekcijām



Jauna patentēta noslēdzošā sistēma

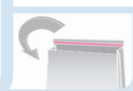

## SGAIEL®

### Superabsorbenta pulveris dispenserēs

Patentēta molekula - pulverveida absorbējoša viela "SGAIEL®", kas pārvērš šķidrumu gēlā.

Pulveris uz tīklveida nātrija poliakrilāta bāzes, kas nonākot kontaktā ar šķidrumu un ūdens bāzes šķīdumiem pārvērš tos gēlā. Daļiņu izmērs < 220µ. Bez smaržas. Gatavs lietošanai. Spēj absorbēt 60-500 reizes lielāku šķidruma tilpumu nekā absorbenta apjoms.

Darbības mehānisms - gelifikācijas process 30 sekundēs, pārtrauc urīnvielas sadalīšanos amonjakā, tādējādi, novēršot smakas izdalīšanos, kā arī, fizikāla šķidruma izolēšana gēla masā, pārtrauc tā oksidēšanās procesu gaisā, novēršot baktēriju izplatīšanos.

#### PIELIETOJUMS

Izmantojams jebkurā slimnīcas nodaļā, kur notiek lielas šķidrumu noplūdes: operāciju zālēs, dzemdību nodaļās, ceļgala artroskopijas procedūru laikā u.c.



IZMĒRI  
200g/400g/1000g



## HAPPY COVER PAD®

### Šībera pārvalks



IZMĒRI  
600 x 500 mm  
Iepakojumā 20 gab.

Uz šībera uzvelkams Happy Cover® pārvalks: pēc aptuveni 30 sekundēm SGAIEL® molekula pārvērš urīnu un izkārnījumus gēlā, ko var izmest atkritumu konteinerā.

#### APRAKSTS

Šībera pārvalks no balta polietilēna, pēc lietošanas ērti un viegli noslēdzams.

Tā iekšpusē atrodas pulverveida superabsorbējoša viela "SGAIEL®", noslēgta ūdenī šķīstošā apvalkā, kas izšķīst nonākot saskarē ar šķidrumu un pārvērš to gēlā.

#### PIELIETOJUMS

Vienreiz lietojams šībera pārvalks, izmantojams slimnīcās, aprūpes iestādēs, kā arī slimnieku kopšanai mājās apstākļos.



## HAPPY COVER PP®

### Urīna savākšanas sistēma



**Higiēniskais maisiņš Happy Cover P.P.® satur superabsorbējošu vielu SGAIEL®, kas nonākot kontaktā ar šķidrumu, pārvērš to gēlā, tādējādi samazinot izšļakstīšanās risku un nepatīkamu aromātu.**



**IZMĒRI**  
160 x 380 mm  
Iepakojumā 20 gab.

#### APRAKSTS

Urīna maisiņš no zaļa polietilēna, pēc lietošanas ērti un viegli noslēdzams.

**Tā iekšpusē atrodas pulverveida absorbējoša viela "SGAIEL®", noslēgta ūdenī šķīstošā apvalkā, kas izšķīst nonākot saskarē ar šķidrumu un pārvērš to gēlā.**

#### PIELIETOJUMS

Vienreiz lietojams urīna savākšanas maisiņš, paredzēts vīriešiem izmantošanai pusuāra vai pīles vietā. Pielietojams slimnīcās, aprūpes iestādēs, vietās, kur nav pieejama tualete, kā arī invalīdiem ar pārvietošanās problēmām un guļoziem slimniekiem.



## HAPPY COVER RIG®

### Atvemto masu savākšanas sistēma

**Maisiņš ir gatavs lietošanai, absorbējošais pulveris pārvērš atveiktās masas cietā substancē, nodrošina lietošanas diskretumu un ērtības, novērš nepatīkamu aromātu. Tas arī atvieglo medicīnas personāla darbu, aizsargā no infekcijām un netīrumiem.**



**IZMĒRI**  
250 x 250 mm  
Iepakojumā 20 gab.

#### APRAKSTS

Vemšanas maisiņš no zila polietilēna, pēc lietošanas ērti un viegli noslēdzams.

**Tā iekšpusē atrodas pulverveida absorbējoša viela "SGAIEL®", noslēgta ūdenī šķīstošā apvalkā, kas izšķīst nonākot saskarē ar šķidrumu un pārvērš to gēlā.**

#### PIELIETOJUMS

Vienreiz lietojams atvemto masu savākšanas maisiņš, paredzēts izmantošanai ātrās palīdzības mašīnās, slimnīcu uzņemšanas, gastroenteroloģijas, onkoloģijas u.c. nodaļās. Noderīgs arī bērniem un pieaugušajiem, kas cieš no sliktas dūšas, tai skaitā ceļojumu laikā.