

Iznīcina patogēnus Noķer daļiņas Kontrolē infekcijas

Jaunā Novaerus Defend 1050 iekārta apvieno patentētu NanoStrike plazmas tehnoloģiju ātrai gaisa dezinfekcijai kombinācijā ar Camfil® trīspakāpju filtru sistēmu labākai gaisa attīrīšanai. Efektīva, droša, pārnēsājama un ērti lietojama.



Spriegums: 230 VAC / 50 Hz

Ventilators: 5 ātrumi

Patēriņš: 137 – 331 W

Gaisa plūsma: 181 – 906 m³/st

Izmēri: 93.0 cm (h) × 48.5 cm (w) ×
57.5 cm (d)

Svars: 53.8 kg

Filtrs 1: M5 ieklūdes filtrs

Filtrs 2: HEPA H13 filtrs

Filtrs 3: G4 Ogles filtrs


Trokšņu līmenis:

47.9 – 75.1 dBA pie iekārtas
38.5 – 62.9 dA 1m no iekārtas




99.9% SAMAZINĀŠANA

A tipa gripas vīruss 10-20 minūtēs

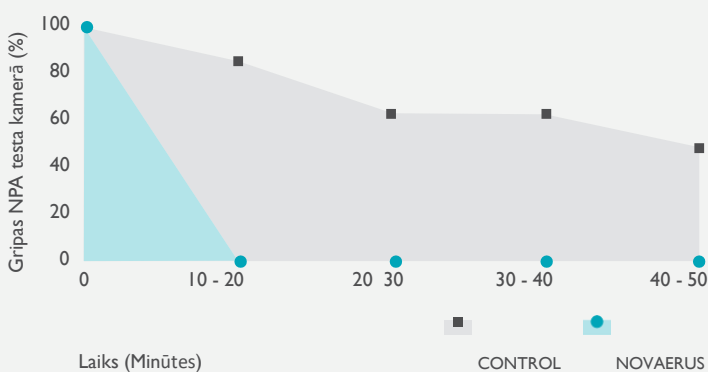

99.99% SAMAZINĀŠANA
Aspergillus niger
30 minūtes

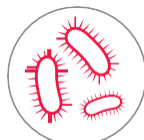

99.9% SAMAZINĀŠANA
Clostridium difficile
40 minūtes



97% SAMAZINĀŠANA
Tuberculosis
30 minūtes



99.94% SAMAZINĀŠANA
Staphylococcus epidermidis
15 minūtes



99% SAMAZINĀŠANA
VOC (Toluene)
9.1 minūte



99.49% SAMAZINĀŠANA
Nitrogen dioxide (NO₂)
7.2 minūte



99.68% SAMAZINĀŠANA
Formaldehyde
1.1 minūte



99% SAMAZINĀŠANA
PM1
6.33 minūte



99% SAMAZINĀŠANA
PM2.5
6.26 minūte

Defend 1050 nodrošina ātru gaisa remediāciju lielās telpās un augsta infekcijas riska situācijās.



OPERĀCIJU ZĀLES

Samazina infekcijas un smaku ķirurģisko operāciju vietās



STANDARTA PALĀTAS

Samazina infekcijas, smakas un to uzliesmojumu



INTENSĪVAS TERAPIJAS PALĀTAS

Samazina savstarpējas inficēšanās risku



IN VITRO FERTILIZĀCIJAS LABORATORIJAS

Uzlabo apstākļus vesela embrija attīstībai



BĒRNUDĀRZI UN SKOLAS

Samazina slimības un prombūtni



NETLIEKAMĀS PALĪDZĪBAS TELPAS

Samazina infekcijas riskus, smakas, kairinājumu un alergēnus



BŪVLAUKUMI


Samazina infekcijas, smaku, astmu un alerģiju



SENIORU PANSIONĀTI

Samazina infekcijas, smakas un to uzliesmojumu

Kā strādā Defend 1050?

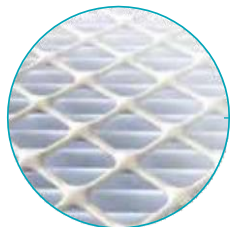

HEPA H13 FILTRS

Camfil® HEPA H13 filtrs noķer bakteriālās atliekas un daļiņas ar izmēriem no 0.12µm.




M5 IEPLŪDES FILTRS

Spēcīgs ventilators ievelk iekštelpu gaisu caur Camfil® priekšfiltru (ieplūdes filtru), notverot lielas daļiņas, lai aizsargātu iekšējās plazmas spoles un lai pagarinātu HEPA filtra kalpošanas laiku.



G4 OGLES FILTRS

Camfil® filtrs ar aktivēto ogli absorbē GOS, smakas, un piemaisījumus.

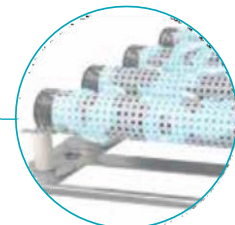

PLAZMAS SPOLES

Sešas ultra-zemas enerģijas NanoStrike plazmas spoles ātri deaktivizē mikroorganismus un vīrusus DNS līmenī.